



pmirGLO Vector Information

Created with SnapGene®

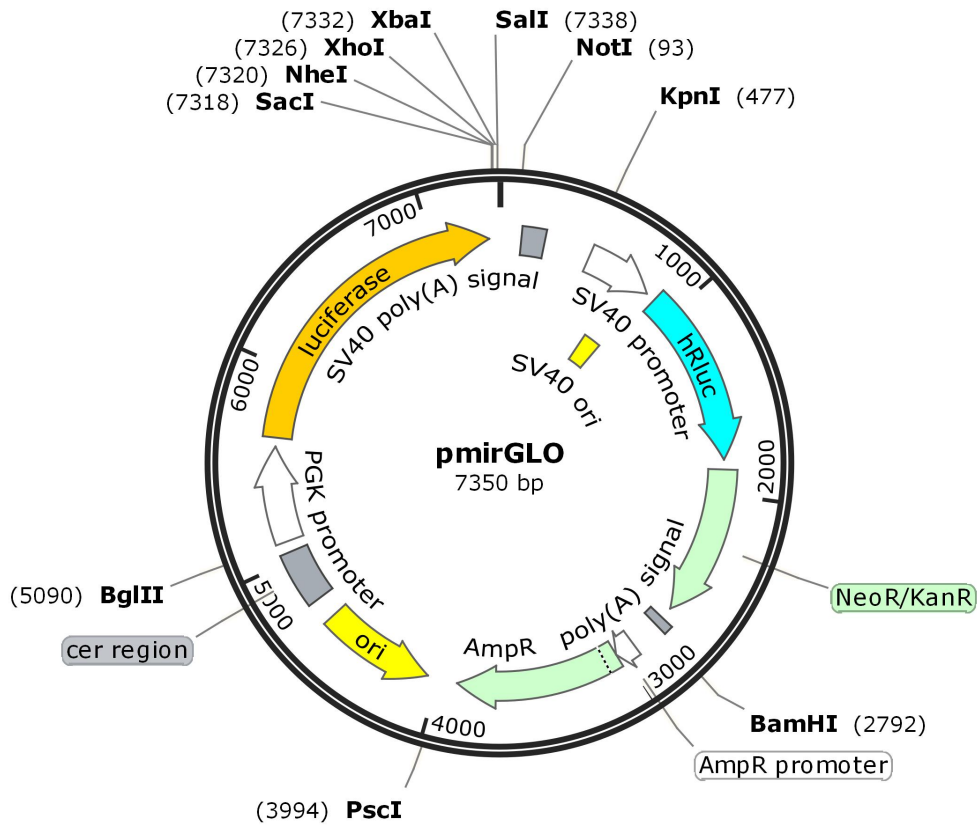

载体名称:	pmirGLO/ pMir-Glo
质粒类型:	miRNA 功能研究载体, 荧光蛋白报告载体
表达水平:	高拷贝
启动子:	PGK promoter
克隆方法:	多克隆位点, 限制性内切酶
克隆位点:	MCS
载体大小:	7350bp
5' 测序引物及序列:	--
3' 测序引物及序列:	PCMV-R: TCCAAACTCATCAATGTATC
载体标签:	N-Luc2
载体抗性:	Amp
筛选标记:	Neo
产品目录号:	--
稳定性:	瞬时表达 Transient
组成型/诱导型:	非组成型
病毒/非病毒:	非病毒
克隆菌株:	DH5 α / Match-T1

MCS ☒:

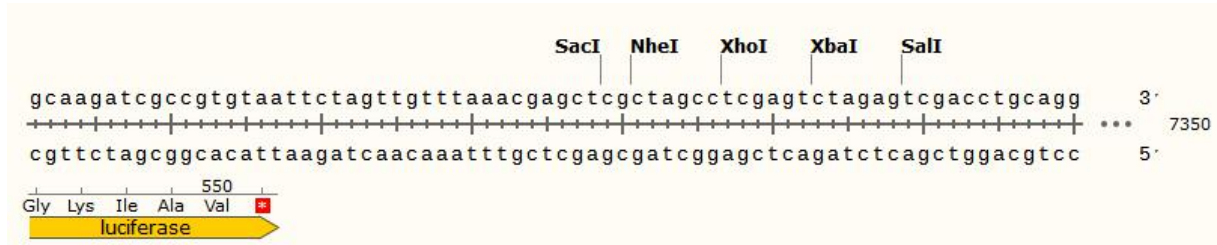

LOCUS Exported 7350bp ds-DNA circular SYN 03-AUG-2017
DEFINITION synthetic circular DNA
ACCESSION .
VERSION .
KEYWORDS pmirGLO
SOURCE synthetic DNA construct
ORGANISM synthetic DNA construct
REFERENCE 1 (bases 1 to 7350)
AUTHORS aaaaaa
TITLE Direct Submission
JOURNAL Exported Thursday, June 20, 2019 from SnapGene 3.2.1
<http://www.snapgene.com>

FEATURES Location/Qualifiers
source 1..7350
/organism="synthetic DNA construct"
/mol_type="other DNA"
polyA_signal 115..236
/note="SV40 poly(A) signal"
/note="SV40 polyadenylation signal"
promoter 481..838
/note="SV40 promoter"
/note="SV40 enhancer and early promoter"
rep_origin 689..824
/note="SV40 ori"
/note="SV40 origin of replication"
CDS 889..1821
/codon_start=1
/product="Renilla luciferase"
/note="hRluc"
/note="human codon-optimized"
/translation="MASKVYDPEQRKRMITGPGQWWARCKQMNVLDSFINYYDSEKHAEN
AVIFLHGNAASSYLWRHVPHIEPVARCIIPDLIGMGKSGKSGNGSYRLLDHYKYLTAW
FELLNLPKKIIFVGHWDWACLAHFHYSYEQDKIKAIVHAESVVDVIESWDEWPDIEEDI
ALIKSEEKGMVLENNFFVETMLPSKIMRKLPEEFAAYLEPFKEKGEVRRPTLSWPRE
IPLVKGKPDVVQIVRNYNAYLRASDDLPMFIESDPGFFSNAIVEGAKKFPNTEFVKV

CDS 1873..2664
KGLHFSQEDAPDEMGKYIKSFVERVLKNEQ"
/codon_start=1
/gene="aph(3')-II (or nptII)"
/product="aminoglycoside phosphotransferase from Tn5"
/note="NeoR/KanR"
/note="confers resistance to neomycin, kanamycin, and G418 (Geneticin(R))"
/translation="IEQDGLHAGSPAAWVERLFGYDWAQQTIGCSDAAVFRLSAQGRPV
LFVKTDLSGALNELQDEAARLSWLATTGVPCAAFLDVVTEAGRDWLLGEVPGDLLSS
HLAPAEKVSIMADAMRRLHTLDPATCPFDHQAKHRIERARTRMEAGLVDQDDLDEEHQG
LAPAEFARLKARMPDGEDLVVTHGDACLPNIMVENGRFSGFIDCGRLGVADRYQDIAL
ATRDIAEELGGEWADRFLVLYGIAAPDSQRIAFYRLLDEFF"

polyA_signal 2728..2776
/note="synthetic polyadenylation signal"

promoter 2932..3036
/gene="bla"
/note="AmpR promoter"

CDS 3037..3897
/codon_start=1
/gene="bla"
/product="beta-lactamase"
/note="AmpR"
/note="confers resistance to ampicillin, carbenicillin, and related antibiotics"
/translation="MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYI
ELDLNSGKILESFRPEERFPMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIRHYSQNDLVEYS
PVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRW
EPELNEAIPNDERDITMPVAMATTLRKLTTGELLTLASRQQLIDWMEADKVVAGPLLRSA
LPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGAS
LIKHW"

rep_origin complement(4055..4643)
/direction=LEFT
/note="ori"
/note="high-copy-number ColE1/pMB1/pBR322/pUC origin of replication"

misc_feature 4759..5042
/note="cer region"
/note="ColE1-derived recombination site that helps to maintain plasmids as monomers"

promoter 5099..5598
/note="PGK promoter"
/note="mouse phosphoglycerate kinase 1 promoter"

CDS 5645..7297

```

/codon_start=1
/product="firefly luciferase"
/note="luciferase"
/note="synthetic luc2 version of the luciferase gene"
/translation="MEDAKNIKKGPAPFYPLEDGTAGEQLHKAMKRYALVPGTIAFTDA
HIEVDITYAEYFEMSVRLAEAMKRYGLNTNHRIVVCSENSLQFFMPVLGALFIGVAVAP
ANDIYNERELLNSMGISQPTVVVFSKGLQKILNVQKKLPIIQKIIIMDSKTDYQGFQS
MYTFVTSHLPPGFNEYDFVPESFDRDKTIALIMNSSGSTGLPKGVALPHRTACVRFSHA
RDPIFGNQIIPDTAILSVPVPHHGFGMFTTLGYLICGFRVLMYRFEELFLRSLQDYK
IQSALLVPTLFSFFAKSTLIDKYDLSNLHEIASGGAPLSKEVGEAVAKRFHLPGIRQGY
GLTETTSAILITPEGDDKPGAVGVVPPFEAKVVDLDTGKTLGVNQRGELCVRGPMIMS
GYVNNPEATNALIDKDWLHSGDIAYWDEDEHFFIVDRLKSLIKYKGYQVAPAELESIL
LQHPNIFDAGVAGLPDDDAGELPAAVVVLEHGKTMTEKEIVDYVASQVTTAKKLRGGVV
FVDEVPKGLTGKLDARKIREILIKAKKGGKIAV"

```

ORIGIN

```

1 CATGCAAGCT GATCCGGCTG CTAACAAAGC CCGAAAGGAA GCTGAGTTGG CTGCTGCCAC
61 CGCTGAGCAA TAACTAGCAT AACCCCTTGG GCGGCCCGCT TCGAGCAGAC ATGATAAGAT
121 ACATTGATGA GTTTGGACAA ACCACAATA GAATGCAGTG AAAAAAATGC TTTATTTGTG
181 AAATTTGTGA TGCTATTGCT TTATTTGTAA CCATTATAAG CTGCAATAAA CAAGTTAACA
241 ACAACAATTG CATTCAATTT ATGTTTCAGG TTCAGGGGGA GATGTGGGAG GTTTTTTTAA
301 GCAAGTAAAA CCTCTACAAA TGTGGTAAAA TCGAATTTTA ACAAATATT AACGCTTACA
361 ATTTCTGAT GCGGTATTTT CTCCTTACGC ATCTGTGCGG TATTTACAC CGCATAACGG
421 GATCTGCGCA GCACCATGGC CTGAAATAAC CTCTGAAAGA GGAAGTGGT TAGGTACCTT
481 CTGAGGCGGA AAGAACCAGC TGTGGAATGT GTGTCAGTTA GGGTGTGGAA AGTCCCAGG
541 CTCCCAGCA GGCAGAAGTA TGCAAAGCAT GCATCTCAAT TAGTCAGCAA CCAGGTGTGG
601 AAAGTCCCCA GGCTCCCCAG CAGGCAGAAG TATGCAAAGC ATGCATCTCA ATTAGTCAGC
661 AACCATAGTC CCGCCCCTAA CTCCGCCAT CCCGCCCTA ACTCCGCCA GTTCCGCCA
721 TTCTCCGCC CATGGCTGAC TAATTTTTT TATTTATGCA GAGGCCGAG CCGCCTCGGC
781 CTCTGAGCTA TTCCAGAAGT AGTGAGGAG CTTTTTTGGA GGCCTAGGCT TTTGCAAAAA
841 GCTTGATTCT TCTGACACAA CAGTCTCGAA CCAAAGGCTG GAGCCACCAT GGCTCCAAG
901 GTGTACGACC CCGAGCAACG CAAACGCATG ATCACTGGGC CTCAGTGGTG GGCTCGCTGC
961 AAGCAAATGA ACGTGCTGGA CTCCTTCATC AACTACTATG ATTCCGAGAA GCACGCCGAG
1021 AACGCCGTGA TTTTCTGCA TGGTAAACGCT GCCTCCAGCT ACCTGTGGAG GCACGTCGTG
1081 CCTCACATCG AGCCCGTGGC TAGATGCATC ATCCCTGATC TGATCGGAAT GGGTAAGTCC
1141 GGCAAGAGCG GGAATGGCTC ATATCGCCTC CTGGATCACT ACAAGTACCT CACCGCTTGG
1201 TTCGAGCTGC TGAACCTTCC AAAGAAAATC ATCTTTGTGG GCCACGACTG GGGGGCTTGT
1261 CTGGCCTTTC ACTACTCCTA CGAGACCAA GACAAGATCA AGGCCATCGT CCATGCTGAG
1321 AGTGTCGTGG ACGTGATCGA GTCCTGGGAC GAGTGGCCTG ACATCGAGGA GGATATCGCC
1381 CTGATCAAGA GCGAAGAGGG CGAGAAAATG GTGCTTGAGA ATAACCTTCT CGTCGAGACC
1441 ATGCTCCCAA GCAAGATCAT GCGGAAACTG GAGCCTGAGG AGTTCGCTGC CTACCTGGAG
1501 CCATTCAAGG AGAAGGGCGA GGTTAGACGG CCTACCCTCT CCTGGCCTCG CGAGATCCCT
1561 CTCGTTAAGG GAGGCAAGCC CGACGTCGTC CAGATTGTCC GCAACTACAA CGCCTACCTT
1621 CGGGCCAGCG ACGATCTGCC TAAGATGTTT ATCGAGTCCG ACCCTGGGTT CTTTTCCAAC
1681 GCTATTGTCG AGGGAGCTAA GAAGTCCCT AACACCGAGT TCGTGAAGGT GAAGGGCCTC

```

1741 CACTTCAGCC AGGAGGACGC TCCAGATGAA ATGGGTAAGT ACATCAAGAG CTTCGTGGAG
1801 CGCGTGCTGA AGAACGAGCA GACCGGTGGT GGGAGCGGAG GTGGCGGATC AGGTGGCGGA
1861 GGCTCCGGAG GGATTGAACA AGATGGATTG CACGCAGGTT CTCCGGCCGC TTGGGTGGAG
1921 AGGCTATTCG GCTATGACTG GGCACAACAG ACAATCGGCT GCTCTGATGC CGCCGTGTTC
1981 CGGCTGTCAG CGCAGGGGCG CCCGGTTCTT TTTGTCAAGA CCGACCTGTC CGGTGCCCTG
2041 AATGAACTGC AGGACGAGGC AGCGCGGCTA TCGTGGCTGG CCACGACGGG CGTTCCTTGC
2101 GCAGCTGTGC TCGACGTTGT CACTGAAGCG GGAAGGGACT GGCTGCTATT GGGCGAAGTG
2161 CCGGGGCAGG ATCTCCTGTC ATCTCACCTT GCTCCTGCCG AGAAAGTATC CATCATGGCT
2221 GATGCAATGC GCGGCTGCA TACGCTTGAT CCGGCTACCT GCCATTCTGA CCACCAAGCG
2281 AAACATCGCA TCGAGCGAGC ACGTACTCGG ATGGAAGCCG GTCTTGTCGA TCAGGATGAT
2341 CTGGACGAAG AGCATCAGGG GCTCGCGCCA GCCGAAGTGT TCGCCAGGCT CAAGGCGCGC
2401 ATGCCCACG GCGAGGATCT CGTCGTGACC CATGGCGATG CCTGCTTGCC GAATATCATG
2461 GTGGAAAATG GCCGCTTTTC TGGATTTCATC GACTGTGGCC GGCTGGGTGT GGGCGACCGC
2521 TATCAGGACA TAGCGTTGGC TACCCGTGAT ATTGCTGAAG AGCTTGGCGG CGAATGGGCT
2581 GACCGCTTCC TCGTGCTTTA CGGTATCGCC GCTCCCGATT CGCAGCGCAT CGCCTTCTAT
2641 CGCCTTCTTG ACGAGTTCTT CTGAGCGGGA CTCTGGGGTT CGAAATGACC GACCAAGCGA
2701 CGCCCAACCT GCCATCACGA TGGCCGCAAT AAAATATCTT TATTTTCATT ACATCTGTGT
2761 GTTGGTTTTT TGTGTGAATC GATAGCGATA AGGATCCTCT TTGCGCTTGC GTTTCCCTT
2821 GTCCAGATAG CCCAGTAGCT GACATTCATC CGGGGTCAGC ACCGTTTCTG CGGACTGGCT
2881 TTCTACGTAA TGGTTTCTTA GACGTCAGGT GGCACCTTTC GGGGAAATGT GCGCGGAACC
2941 CCTATTTGTT TATTTTTCTA AATACATTCA AATATGTATC CGCTCATGAG ACAATAACCC
3001 TGATAAATGC TTCAATAATA TTGAAAAGG AAGAGTATGA GTATTCAACA TTTCCGTGTC
3061 GCCCTTATTC CCTTTTTTGC GGCATTTTGC CTCCTGTTT TTGCTCACCC AGAAACGCTG
3121 GTGAAAGTAA AAGATGCTGA AGATCAGTTG GGTGCACGAG TGGGTTACAT CGAACTGGAT
3181 CTCAACAGCG GTAAGATCCT TGAGAGTTTT CGCCCCGAAG AACGTTTTCC AATGATGAGC
3241 ACTTTCAAAG TTCTGCTATG TGGCGCGGTA TTATCCCGTA TTGACGCCGG GCAAGAGCAA
3301 CTCGGTCGCC GCATACACTA TTCTCAGAAT GACTTGGTTG AGTACTCACC AGTCACAGAA
3361 AAGCATCTTA CGGATGGCAT GACAGTAAGA GAATTATGCA GTGCTGCCAT AACCATGAGT
3421 GATAAACTG CGGCCAACTT ACTTCTGACA ACTATCGGAG GACCGAAGGA GCTAACCGCT
3481 TTTTGCACA ACATGGGGGA TCATGTAACT CGCCTTGATC GTTGGGAACC GGAGCTGAAT
3541 GAAGCCATAC CAAACGACGA GCGTGACACC ACGATGCCTG TAGCAATGGC AACAACGTTG
3601 CGCAAATAT TAACTGGCGA ACTACTTACT CTAGCTTCCC GGCAACAATT AATAGACTGG
3661 ATGGAGGCGG ATAAAGTTGC AGGACCACTT CTGCGCTCGG CCCTTCCGGC TGGCTGGTTT
3721 ATTGCTGATA AATCTGGAGC CGGTGAGCGT GGGTCTCGCG GTATCATTGC AGCACTGGGG
3781 CCAGATGGTA AGCCCTCCCG TATCGTAGTT ATCTACACGA CGGGGAGTCA GGCAACTATG
3841 GATGAACGAA ATAGACAGAT CGCTGAGATA GGTGCCTCAC TGATTAAGCA TTGGTAATTC
3901 GAAATGACCG ACCAAGCGAC GCCCAACCGG TATCAGCTCA CTCAAAGGCG GTAATACGGT
3961 TATCCACAGA ATCAGGGGAT AACGCAGGAA AGAACATGTG AGCAAAAGGC CAGCAAAAGG
4021 CCAGGAACCG TAAAAAGGCC GCGTTGCTGG CGTTTTTCCA TAGGCTCCGC CCCCCTGACG
4081 AGCATCACAA AAATCGACGC TCAAGTCAGA GGTGGCGAAA CCCGACAGGA CTATAAAGAT
4141 ACCAGGCGTT TCCCCCTGGA AGCTCCCTCG TGCCTCTCC TGTTCCGACC CTGCCGCTTA
4201 CCGGATACCT GTCCGCCTTT CTCCCTTCGG GAAGCGTGGC GCTTTCTCAT AGCTCACGCT
4261 GTAGGTATCT CAGTTCGGTG TAGGTCGTTT GCTCCAAGCT GGGCTGTGTG CACGAACCCC
4321 CCGTTCAGCC CGACCGCTGC GCCTTATCCG GTAACATATCG TCTTGAGTCC AACCCGGTAA

4381 GACACGACTT ATCGCCACTG GCAGCAGCCA CTGGTAACAG GATTAGCAGA GCGAGGTATG
4441 TAGGCGGTGC TACAGAGTTC TTGAAGTGGT GGCCTAACTA CGGCTACACT AGAAGGACAG
4501 TATTTGGTAT CTGCGCTCTG CTGAAGCCAG TTACCTTCGG AAAAAGAGTT GGTAGCTCTT
4561 GATCCGGCAA ACAAACCACC GCTGGTAGCG GTGGTTTTTT TGTGTTGCAAG CAGCAGATTA
4621 CGCGCAGAAA AAAAGGATTT CAAGAAGATC CTTTGATCTT TTCTACGGGG TCTGACGCTC
4681 AGTGAACGA AAATCACGT TAAGGGATTT TGGTCATGAG ATTATCAAAA AGGATCTTCA
4741 CCTAGATCCT TTTATAGTCC GGAAATACAG GAACGCACGC TGGATGGCCC TTCGCTGGGA
4801 TGGTGAAACC ATGAAAAATG GCAGCTTCAG TGGATTAAGT GGGGGTAATG TGGCCTGTAC
4861 CCTCTGGTTG CATAGGTATT CATA CGGTTA AAATTTATCA GGC GCGATTG CGGCAGTTTT
4921 TCGGGTGGTT TGTGTCATT TTTACCTGTC TGCTGCCGTG ATCGCGCTGA ACGCGTTTTA
4981 GCGGTGCGTA CAATTAAGGG ATTATGGTAA ATCCACTTAC TGTCTGCCCT CGTAGCCATC
5041 GAGATAAACC GCAGTACTCC GGCCACGATG CGTCCGGCGT AGAGGATCGA GATCTACCGG
5101 GTAGGGGAGG CGCTTTTCCC AAGGCAGTCT GGAGCATGCG CTTTAGCAGC CCCGCTGGGC
5161 ACTTGGCGCT ACACAAGTGG CCTCTGGCCT CGCACACATT CCACATCCAC CGGTAGGCGC
5221 CAACCGGCTC CGTTCCTTGG TGGCCCTTC GCGCCACCTT CTA CTCTCCCT CCTAGTCAGG
5281 AAGTTCCTCC CCGCCCGCA GCTCGGTCG TGCAGGACGT GACAAATGGA AGTAGCACGT
5341 CTCACTAGTC TCGTGCAGAT GGACAGCACC GCTGAGCAAT GGAAGCGGGT AGGCCTTTGG
5401 GGCAGCGGCC AATAGCAGCT TTGCTCCTTC GCTTCTGGG CTCAGAGGCT GGAAGGGGT
5461 GGGTCCGGGG GCGGGCTCAG GGGCGGGCTC AGGGGCGGG CGGGCGCCC AAGTCTCTCC
5521 GGAGGCCCGG CATTCTGCAC GCTTCAAAG CGCACGTCTG CCGCGCTGTT CTCCTCTTCC
5581 TCATCTCCGG GCCTTTGAC CTGCAGCCA AGCTTGGCAA TCCGGTACTG TTGGTAAAGC
5641 CACCATGGAA GATGCCAAAA ACATTAAGAA GGGCCAGCG CCATTCTACC CACTCGAAGA
5701 CGGGACCGCC GCGGAGCAGC TGCACAAAGC CATGAAGCGC TACGCCCTGG TGCCCGGCAC
5761 CATCGCCTTT ACCGACGCAC ATATCGAGGT GGACATTACC TACGCCGAGT ACTTCGAGAT
5821 GAGCGTTCGG CTGGCAGAAG CTATGAAGCG CTATGGGCTG AATACAAACC ATCGGATCGT
5881 GGTGTGCAGC GAGAATAGCT TGCAGTTCTT CATGCCCGT TGGGTGCC TGTTCATCGG
5941 TGTGGCTGTG GCCCAGCTA ACGACATCTA CAACGAGCG GAGCTGCTGA ACAGCATGGG
6001 CATCAGCCAG CCCACCGTCG TATTCGTGAG CAAGAAAGGG CTGCAAAAGA TCCTCAACGT
6061 GCAAAAGAAG CTACCGATCA TACAAAAGAT CATCATCATG GATAGCAAGA CCGACTACCA
6121 GGGCTTCCAA AGCATGTACA CCTTCGTGAC TTCCATTG CCACCCGGCT TCAACGAGTA
6181 CGACTTCGTG CCCGAGAGCT TCGACCGGA CAAAACCATC GCCCTGATCA TGAACAGTAG
6241 TGGCAGTACC GGATTGCCA AGGGCGTAGC CCTACCGCAC CGCACCCTT GTGTCCGATT
6301 CAGTCATGCC CGCGACCCA TCTTCGGCAA CCAGATCATC CCCGACACCG CTATCCTCAG
6361 CGTGGTGCCA TTTCACCACG GCTTCGGCAT GTTACCACG CTGGGCTACT TGATCTGCGG
6421 CTTTCGGGTC GTGCTCATGT ACCGCTTCGA GGAGGAGCTA TTCTTGC GCA GCTTGAAGA
6481 CTATAAGATT CAATCTGCCC TGCTGGTGCC CACACTATTT AGCTTCTTCG CTAAGAGCAC
6541 TCTCATCGAC AAGTACGACC TAAGCAACTT GCACGAGATC GCCAGCGGCG GGGCGCCGCT
6601 CAGCAAGGAG GTAGGTGAGG CCGTGGCCAA ACGCTTCCAC CTACCAGGCA TCCGCCAGGG
6661 CTACGGCCTG ACAGAAACAA CCAGCGCAT TCTGATCACC CCCGAAGGG ACGACAAGCC
6721 TGGCGCAGTA GGCAAGGTGG TGCCCTTCTT CGAGGCTAAG GTGGTGGACT TGGACACCGG
6781 TAAGACTG GGTGTGAACC AGCGCGGCGA GCTGTGCGTC CGTGGCCCA TGATCATGAG
6841 CGGCTACGTT AACAACCCG AGGCTACAAA CGTCTCATC GACAAGGACG GCTGGCTGCA
6901 CAGCGGCGAC ATCGCCTACT GGGACGAGGA CGAGCACTTC TTCATCGTGG ACCGGCTGAA
6961 GAGCCTGATC AAATACAAGG GCTACCAGGT AGCCCCAGCC GAACTGGAGA GCATCCTGCT

7021 GCAACACCCC AACATCTTCG ACGCCGGGGT CGCCGGCCTG CCCGACGACG ATGCCGGCGA
7081 GCTGCCCGCC GCAGTCGTCG TGCTGGAACA CGGTAAAACC ATGACCGAGA AGGAGATCGT
7141 GGACTATGTG GCCAGCCAGG TTACAACCGC CAAGAAGCTG CGCGGTGGTG TTGTGTTCGT
7201 GGACGAGGTG CCTAAAGGAC TGACCGGCAA GTTGGACGCC CGCAAGATCC GCGAGATTCT
7261 CATTAAGGCC AAGAAGGGCG GCAAGATCGC CGTGTAATTC TAGTTGTTA AACGAGCTCG
7321 CTAGCCTCGA GTCTAGAGTC GACCTGCAGG

//

